

Intelligens hordozható mérőműszer


OHE-TWP02-D



Áttekintés

Az OHE-TWP02-D testhőmérsékletet, valamint környezeti hőmérséklet- és páratartalom-mérési módokat kínál. Automatikusan átválthat a testhőmérséklet üzemmódra, amikor a távolságmérő érzékelő érzékeli az emberi testet, és a beépített infravörös termofil érzékelő pontosan érzékeli az emberi testfelületről kibocsátott infravörös fény sugárzását a testhőmérséklet mérésére. A belsejébe integrált páratartalom-érzékelő figyelemmel kísérheti a környezeti hőmérsékletet és a páratartalmat. Az érintésmentes mérés elkerüli a keresztfertőzést, és a nagy fényerő-szegmensű LCD tiszta kijelzőt biztosít, és könnyen kezelhető. Az OHE-TWP02-D olyan beltéri helyszíneken alkalmazható, mint a közösségek, bevásárlóközpontok, irodaházak, iskolák, stb.

Méretek

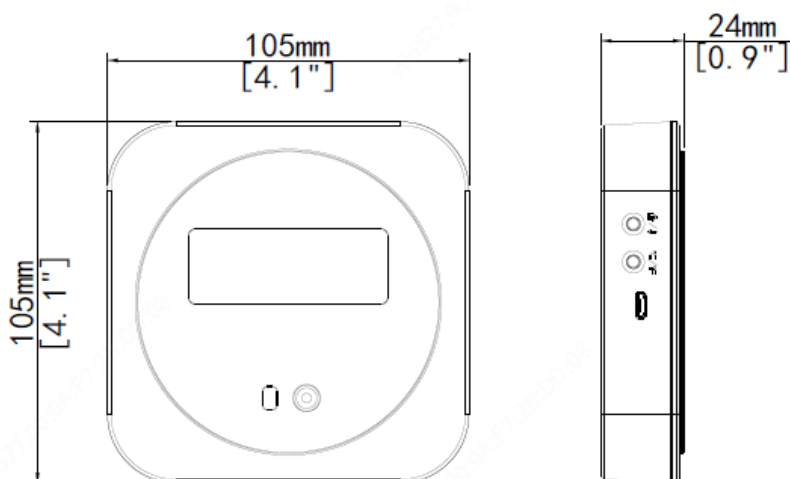

Funkciók

- Az érintésmentes csuklőhőmérséklet-mérés elkerüli a keresztfertőzést.
- Támogatja a környezeti hőmérséklet és páratartalom monitorozását.
- Nagy pontosság, 0,2°C-nál kisebb mérési eltéréssel és 5 cm-nél kisebb mérési távolsággal.
- Automatikusan méri a testhőmérsékletet, ha emberi testet észlel, anélkül, hogy megnyomná a gombot.
- Figyelmeztetéseket ad a különböző eseményekre, beleértve a magas testhőmérsékletet és a hőmérsékleti tartományon kívül.
- A nagy fényerőű LCD kijelző még erős napfény esetén is tiszta nézetet tesz lehetővé.

Rendelési adatok

Modell	Megjegyzések
OHE-TWP02-D	Intelligens hordozható mérőműszer
OHE-TWP02-D-S31	Intelligens hordozható mérőműszer és konzol

Funkciók

Paraméter	Leírás
Munka mód	Automatikus mód: Alapértelmezés szerint megjeleníti a környezeti hőmérsékletet, és megjeleníti a testhőmérsékletet, amikor az emberi testet észleli a mérési tartományon belül. A testhőmérséklet 10-es években jelenik meg, miután nem észlelnek emelt hőmérsékletet.
	Megjelenített ikon (villogó hőmérő ikon):
	Környezeti hőmérséklet mód: Megjeleníti a környezet hőmérsékletét. A testhőmérséklet mérése és a távolságmérő érzékelő ki van kapcsolva. Megjelenített ikon:
Riasztási hőmérséklet	Testhőmérséklet mód: Alapértelmezés szerint --.°C / --.°F, és megmutatja a testhőmérsékletet, amikor az emberi testet észlelik a mérési tartományon belül. A testhőmérséklet 10-es évekre jelenik meg.
	Megjelenített ikon:
	Az alapértelmezett riasztási hőmérséklet 37,6°C. A beállítás módosítása: 1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsológombot, és dugja be a tápellátást. Megjelenik az aktuális beállítás. 2. Nyomja meg a módkapcsoló gombot () egyszer a 0,1-es emeléshez, nyomja meg egyszer az egységkapcsoló gombot (°C / °F) a 0,1-es csökkenéshez. A tartomány 37°C és 38°C között alakul. 3. A beállítás mentéséhez várjon a 10 másodpercet. Hangjelzést fog hallani, és a beállítás automatikusan mentésre kerül.
Az önteszt elindítása	A bekapcsolódás után a képernyőn lévő összes ikon be van írva, és a csipogó egyszer
Testhőmérséklet mérési módszer	Érintésmentes, csuklőhőmérséklet-mérés
Hőmérséklet-mérési	Test: 32°C és 42°C között

tartomány	Környezet: 0°C és 50°C között
Mérési egység	0,1°C
Mérési eltérés	Test: 35°C és 42°C között: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, Külső környezet tartomány felett: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
Mérési távolság	$\leq 5\text{cm}$
Páratartalom tartomány	0-99% RH
Páratartalom egység	1% RH
Kijelző	Szegmens LCD
	Állítható °C és °F között
Hang riasztás	Egy hangjelzés: A hőmérséklet a riasztási hőmérséklet alatt van
	Állandó sípolás: A hőmérséklet eléri vagy meghaladja a riasztási hőmérsékletet
Anyag	Műanyag
Tápegység	5VDC $\pm 25\%$, Micro-USB
Méret	105mm*105mm*30mm
Felszerelhetőség	falra szerelhető/szabványos konzoltartó
Üzemi hőmérséklet	0°C és 50°C között (10°C és 40°C közötti környezeti hőmérséklet testhőmérséklet módban)
Üzemi páratartalom	$\leq 85\%$ RH, nem kondenzációs
Tárolási hőmérséklet	-20°C és +60°C között
Tárolási páratartalom	$\leq 85\%$ RH, nem kondenzációs
Működési környezet	Fedett beltér

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Épület No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, Kína (310051)

E-mail: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com> ©2020 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

*A termékleírások és a rendelkezésre állás előzetes értesítés nélkül változhatnak.